

Smartes Blutdruckmessgerät

CE-
Zeichen



BPM Vision bietet klinische Messgenauigkeit auf einem großen Farbdisplay und liefert farbcodierte Blutdruckergebnisse sowie eine sofortige Erkennung von Vorhofflimmern (VHF) via EKG-Messung direkt zu Ihnen nach Hause.

Blutdruck- und EKG-Start per Tastendruck | Blutdruckklassifizierung und VHF-Erkennung | Trendanalyse | Einfache Datenweitergabe

Hauptvorteile



Erkennen und kontrollieren Sie Bluthochdruck durch regelmäßige Überwachung des systolischen und diastolischen Blutdrucks.



Erkennen Sie Vorhofflimmern in nur 30 Sekunden, indem Sie ein EKG direkt an Ihrem Gerät durchführen.





Teilen Sie Ihre Ergebnisse mit einer medizinischen Fachkraft oder Ihren Angehörigen.



Bis zu 8 Personen können ihre Messwerte mit der App erfassen – perfekt für Familien und alle, die Ihnen am Herzen liegen.

Einfach, intuitiv und leicht ablesbar

BPM Vision verfügt über einen großen 2,8 Zoll LCD-Farbbildschirm und ermöglicht so einfache Blutdruckmessungen und EKG-Aufzeichnungen. Mit klaren, farbcodierten Ergebnissen ist das Rätselraten vorbei – Sie erhalten sofortige, leicht lesbare Rückmeldungen auf einen Blick.

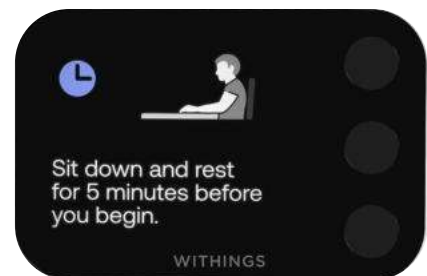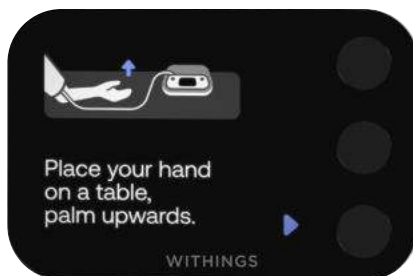

Farbcodiertes Feedback

*Basierend auf offiziellen EU-Richtlinien**

✓ Optimal	✓ Normal	⚠ Hochnormal	⚠ Grad 1 Bluthochdruck	⚠ Grad 2 Bluthochdruck	⚠ Grad 3 Bluthochdruck
--------------	-------------	-----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

- Systolisch: <120 mmHg
- Diastolisch: <80 mmHg
- Systolisch: 120–129 mmHg
- Diastolisch: 80–84 mmHg
- Systolisch: 130–139 mmHg
- Diastolisch: 85–89 mmHg
- Systolisch: 140–159 mmHg
- Diastolisch: 90–99 mmHg
- Systolisch: 160–179 mmHg
- Diastolisch: 100–109 mmHg
- Systolisch: ≥ 180 mmHg
- Diastolisch: ≥ 110 mmHg

McEvoy JW, McCarthy CP, Bruno RM, Brouwers S, Canavan MD, Ceconi C, Christodorescu RM, Daskalopoulou SS, Ferro CJ, Gerds E, Hanssen H, Harris J, Lauder L, McManus RJ, Molloy GJ, Rahimi K, Regitz-Zagrosek V, Rossi GP, Sandset EC, Scheenaerts B, Staessen JA, Uchmanowicz I, Volterrani M, Touyz RM; ESC Scientific Document Group. 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension. Eur Heart J. 2024 Oct 7;45(38):3912-4018. doi: 10.1093/eurheartj/ehae178. Erratum in: Eur Heart J. 2025 Apr 7;46(14):1300. doi: 10.1093/eurheartj/ehaf031. PMID: 39210715.

Weitere Informationen auf www.withings.com

WITHINGS

Einfache Bedienbarkeit und Steuerung

Tutorials auf dem Bildschirm

Schutzhülle mit integriertem Ständer



Technische Daten

Design

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Maße: 23 x 19 x 7 cm (9 x 7,5 x 2,8 inch)
Gewicht (ohne Manschette): 338 g / 0,745 lbs

MATERIALIEN

PC-Kunststoff, Textil, Metallschlaufe

MESSVERFAHREN

BPM Vision verwendet die oszillometrische Methode zur Blutdruckmessung. Diese Technik erkennt Druckschwankungen in der Arterie, die durch Veränderungen des Blutflusses während des Aufpumpens oder Ablassens der Manschette verursacht werden.

DISPLAY

2,8 Zoll LCD-Farbbildschirm

AKKU

Akkulaufzeit: bis zu 1 Jahr
Ladezeit: 3 Stunden

ARMUMFANG

- Standardmanschette 22 cm bis 42 cm
- Zusätzliche XL-Manschette (40 cm bis 52 cm) bestellbar

App & Software

KONNEKTIVITÄT

WLAN und Bluetooth®

WITHINGS APP

Verfügbar im: App Store (iOS), Google Play Store (Android)
Kompatibel mit Apple Health, Google Health Connect und Samsung Health
Withings App Web-Dashboard
iPhone, iPad oder iPod Touch mit iOS 16 und höher oder
Android-Gerät mit OS 10 und höher.
Einrichtung über einen Computer nicht möglich

VIRTUELLER UND GERÄTESPEICHER

Kostenlose und unbegrenzte Online-Speicherung aller Gesundheitsdaten
16 Messungen können zwischen 2 Synchronisierungen gespeichert werden



Inhalt

LIEFERUMFANG

BPM Vision mit Standardmanschette
USB-C-Kabel inbegriffen
Kurzanleitung
Produkthandbuch

ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG

Maße: 25,5 x 19,5 x 9 cm

GEWICHT

Schutzhülle + Gerät + Standardmanschette: 1056 g